




**MANUAL FONOAUDIOLOGÍA
CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
AUDIÓMETRO AMPLIVOX**

A continuación, se describen los pasos que se deberán tener en cuenta en la configuración y funcionamiento del audiómetro Amplivox.



AUDIÓMETRO AMPLIVOX



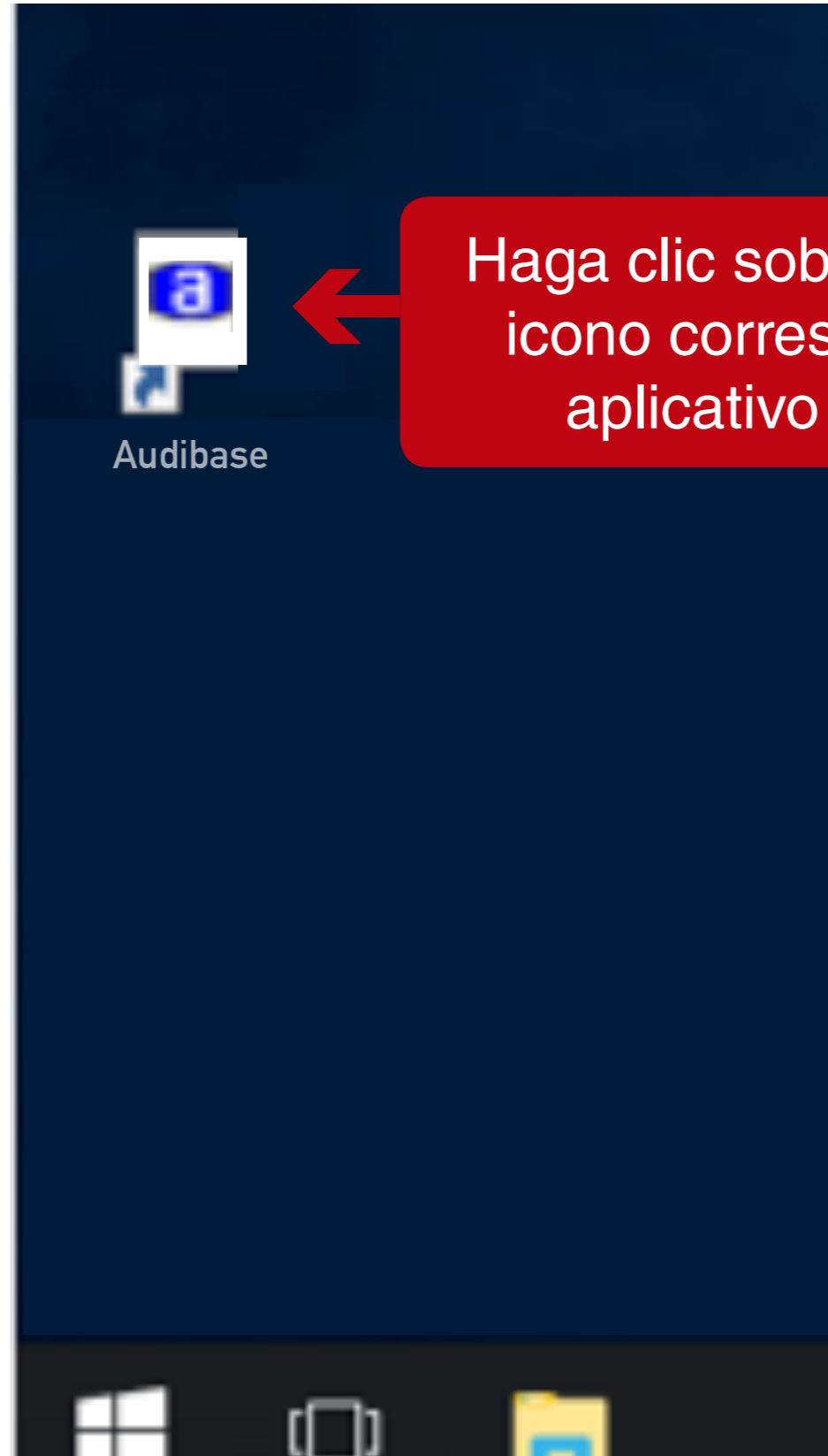

Haga clic sobre el siguiente icono correspondiente al aplicativo "Audibase".

Audibase 5.2 Unregistered

File Setup Edit Database Connect to Help

Register Details Audiograms Questionnaire

Patient No	Surname	Forenames	Last Test	Time of Test	Previous Test	Date of Birth	Categorisation	Position/Rank	Dept/Unit	Company	Location	S
80171700	Luis	Casas	27/07/2018	12:09:58 pm	21/05/2018	16/03/1982	HSE 2006: 1 4 no data					M

Patients: 1 Records: 1 Filter: Off Sorted:

ES 12:05 p.m. 27/07/2018

Una vez realice el examen del aspirante en el Audibase se generará el siguiente registro.


A continuación haga clic en el botón de generar gráfica.

The screenshot shows the Audibase 5.2 Unregistered software interface. The window title is "Audibase 5.2 Unregist...". The menu bar includes "File", "Setup", "Edit", "Database", "Connect to", and "Help". The toolbar contains various icons, with the "Generate Graph" icon (a line graph) highlighted by a red box and a red arrow pointing to it from the text above. Below the toolbar, there are tabs for "Register", "Details", "Audiograms", and "Questionnaire". The main area displays a table with the following data:

Patient No	Surname	Forenames	Last Test	Time of Test	Previous Test	Date of Birth	Categorisation	Position/Rank	Dept/Unit	Company	Location	S
80171700	Luis	Casas	27/07/2018	12:09:58 pm	21/05/2018	16/03/1982	HSE 2006: 1 4 no data	Paciente			bogota	M

At the bottom of the window, there is a status bar showing "Patients: 1", "Records: 1", "Filter: Off", and "Sorted:". The Windows taskbar at the bottom of the screen shows the system tray with the date and time "12:05 p.m. 27/07/2018".

Luego se generará la gráfica tal cual como lo indica el aplicativo.

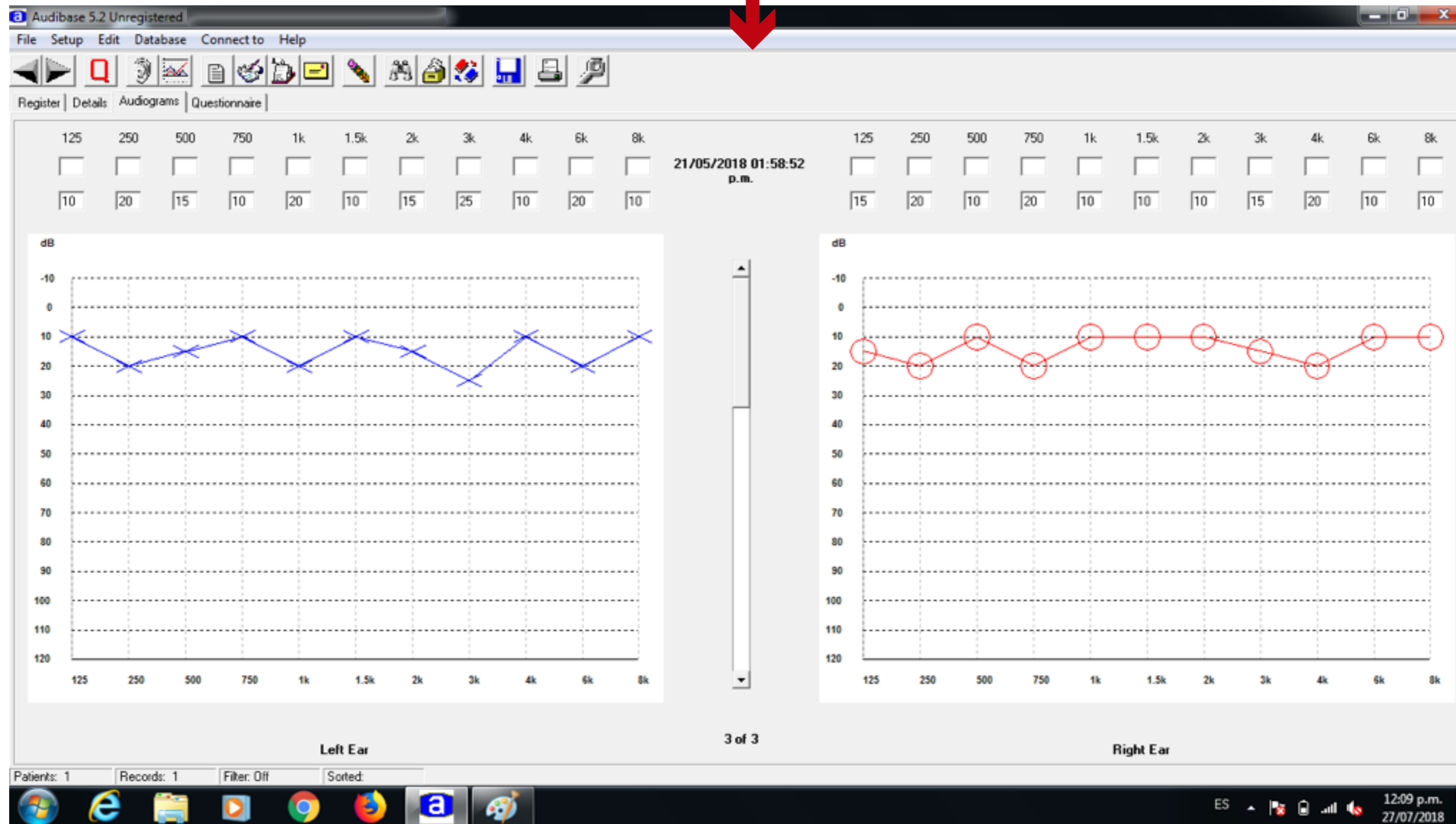

Audibase 5.2 Unregistered

File Setup Edit Database Connect to Help

Register Details Audiograms Questionnaire

Patient No	Surname	Forenames	Last Test	Time of Test	Previous Test	Date of Birth	Categorisation	Position/Rank	Dept/Unit	Company	Location	S
80171720	Luis	Casas	27/07/2018	12:09:58 pm	21/05/2018	16/03/1982	HSE 2006: 1.4 no data	Paciente			bogota	M

Patients: 1 Records: 1 Filter: Off Sorted:

ES 12:10 p.m. 27/07/2018

El audio base guarda la información del aspirante en un registro, tal y como se visualiza.

Audibase 5.2 Unregistered [80171720, Londono Jesus, on 27/07/2018]

File Setup Edit Database Connect to Help

Import
Export
Backup
Exit

Surname	Forenames	Last Test	Time of Test	Previous Test	Date of Birth	Categorisation	Position/Rank	Dept/Unit	Company	Location	S
Jesus	Londono	27/07/2018	12:09:58 p.m.	21/05/2018	16/03/1982	HSE2006: 1.4-no data	Ingeniero	sistemas	grupo digital	bogota	M

Patients: 1 Records: 1 Filter: Off Sorted:

ES 12:10 p.m. 27/07/2018

A continuación se debe exportar el registro del paciente.

Audibase 5.2 Unregistered [80171720, Londono Jesus, on 27/07/2018]

File Setup Edit Database Connect to Help

Register Details Audigrams Questionnaire

Patient No	Surname	Forenames	Last Test	Time of Test	Previous Test	Date of Birth	Categorisation	Position/Rank	Dept/Unit	Company	Location
80171720	Jesus	Londono	27/07/2018	12:09:58 p.m.	21/05/2018	16/03/1982	HSE2006: 1 4-no data	Ingeniero	sistemas	grupo digital	bogota

Guardar como

Program Files (x86) > Audibase5

Organizar Nueva carpeta

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo
80171720..csv	21/05/2018 01:59 ...	Archivo CSV
activelock1884.ocx	11/02/2011 11:30 a...	Control ActiveX
agedistF.tbl	11/02/2011 11:30 a...	Archivo TBL
agedistM.tbl	11/02/2011 11:30 a...	Archivo TBL
ASYCFILT.DLL	11/02/2011 11:30 a...	Extensión de la ap
Audibase5	24/05/2011 04:30 a...	Archivo .CAB
Audibase5	24/05/2011 10:11 a...	Aplicación
audibase5	21/05/2018 02:08 ...	Opciones de conf
audibase5.mdb	27/07/2018 12:10 ...	Archivo MDB
Ca850_1.cvt	11/02/2011 11:30 a...	Archivo CVT

Nombre: 80171720..csv

Tipo:

Ocultar carpetas

Guardar Cancelar

Patients: 1 Records: 1 Filter: Off Sorted:

ES 12:15 p.m. 27/07/2018

El archivo debe guardarse en la ruta que estipule el profesional, se puede ubicar la información en la siguiente carpeta de la unidad de C: Exámenes_ Fonoaudiologia_ Sincro.

Para realizar la configuración audímetro Amplivox en Sincro Desktop realice los siguientes pasos:





Comprobar Dispositivos

En esta sección podrá realizar pruebas de sus dispositivos para comprobar que los tiene correctamente conectados e instalados en su equipo. También podrá exportar capturas de Foto y Firma a un fichero de imagen en su equipo, por si le resultase de utilidad.



Configuración



Ingrese a la configuración
en SincroDesktop

Sincro Desktop

Configuración de Sincro Desktop

Version: 1.0.0.5

Equipo Psicotecnico

Perifericos: [dropdown]
Ubicacion del examen: [input]

Equipo de Audiometría

Perifericos: **Amplivox**
Puerto de comunicaciones: COM1
Bits por segundo: 9600

Equipo Visiometro

Puerto de comunicaciones: [dropdown]
Bits por segundo: 0
Perifericos: [dropdown]

Configuración Sincro

Imprimir factura en impresora de tirilla
LURL:
Certif:

Seleccione en item periférico el equipo denominado "Amplivox."

ES 03:36 p.m. 27/07/2018

Sincro Desktop

Configuración de Sincro Desktop

Version: 1.0.0.5

Equipo Psicotecnico

Perifericos: [dropdown]
Ubicacion del examen: [input]

Equipo de Audiometría

Perifericos: Amplivox
Puerto de comunicaciones: COM1
Bits por segundo: 9600
Ubicacion del examen: [input]

Equipo Visiometro

Puerto de comunicaciones: [dropdown]
Bits por segundo: 0
Perifericos: [dropdown]

Configuración Sincro

Imprimir factura en impresora de tirilla
LURL: https://crc.sincro.co:9090
Certif: C:\Users\Usuario\AppData\Local\

Guardar

Seleccione en item "Puerto de comunicaciones" la opción COM1

ES 03:36 p.m. 27/07/2018

Sincro Desktop

Configuración de Sincro Desktop

Version: 1.0.0.5

Equipo Psicotecnico

Periféricos:

Ubicación del examen:

Equipo de Audiometría

Periféricos: Amplivox

Puerto de comunicaciones: COM1

Bits por segundo: 9600

Ubicación del examen: C:\Exámenes_Fonoaudiologia_Sincro

Equipo Visiometro

Puerto de comunicaciones:

Bits por segundo: 0

Periféricos:

Configuración Sincro

Imprimir factura en impresora de tirilla

LURL:

Certif:

Guardar

ES 03:36 p.m. 27/07/2018

Escriba en el item "Bits por segundo" el número 9600.

Sincro Desktop

Configuración de Sincro Desktop

Version: 1.0.0.5

Equipo Psicotecnico

Perifericos: [Dropdown]

Ubicacion del examen: [Text Field]

Equipo de Audiometría

Perifericos: Amplivox

Puerto de comunicaciones: COM1

Bits por segundo: 9600

Ubicacion del examen: C:\Exámenes_Fonoaudiologia_Sincro

Equipo Visiometro

Puerto de comunicaciones: [Dropdown]

Bits por segundo: 0

Perifericos: [Dropdown]

Configuración Sincro

Imprimir factura en impresora de tirilla

LURL: https://crc.sincro.co:9090

Certif: C:\Users\Usuario\AppData\Local\

Guardar

ES 03:36 p.m. 27/07/2018

En el item "Ubicación del examen" debe ubicarse la ruta de la cual el sistema Sincro va a obtener el archivo.